

BeyoGold™ 标签蛋白纯化系列产品



NEW

**特异性高!
结合容量大!
使用超便携!**

产品特点

- **特异性高, 结合容量大** 使用优质纯化介质, 亲和力强、可以高容量、高特异性地结合标签蛋白;
- **选择灵活** 用户可根据不同的蛋白标签 选择相应的蛋白纯化产品, His 标签蛋白纯化产品包含耐变性剂型和耐还原整合型, 耐变性剂型可用于非变性条件和变性条件, 耐还原整合型可兼容还原剂和整合剂;
- **使用高效, 快速便捷** 蛋白纯化试剂盒提供了标签蛋白纯化所需的相关试剂和亲和层析柱空柱管, 使用更便捷;
- **适用范围广** 可用于纯化细菌、哺乳动物细胞、昆虫及杆状病毒等多种表达系统中表达的 His 或 GST 标签重组蛋白。

产品效果

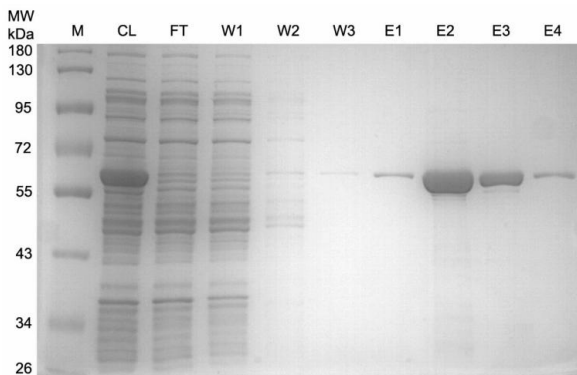


图 1.耐还原整合型 His 标签蛋白纯化试剂/试剂盒纯化 His 标签重组蛋白效果图。M: marker; CL: 细菌裂解液(cell lysate); FT: 上样穿流液(flow through); W1-W3: 洗涤液 1-3 (wash 1-3); E1-E4: 洗脱液 1-4 (elution 1-4)。

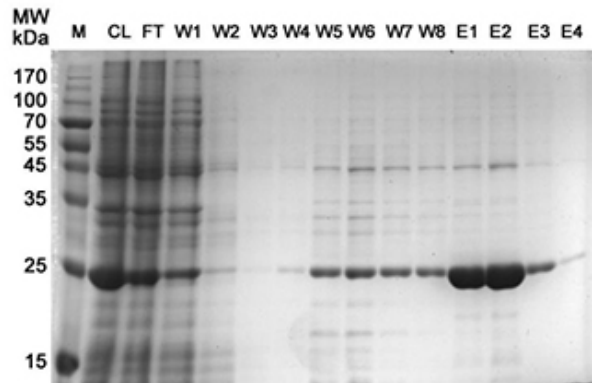


图 2.6M 盐酸胍变性条件下耐变性剂型 His 标签蛋白纯化试剂/试剂盒纯化 His 标签重组蛋白效果图。M: marker (P0076); CL: 细菌裂解液; FT: 上样穿流液; W1-W3: 非变性裂解液洗涤 1-3; W4-W8: 非变性洗涤液洗涤 4-8; E1-E4: 洗脱液洗脱 1-4 。

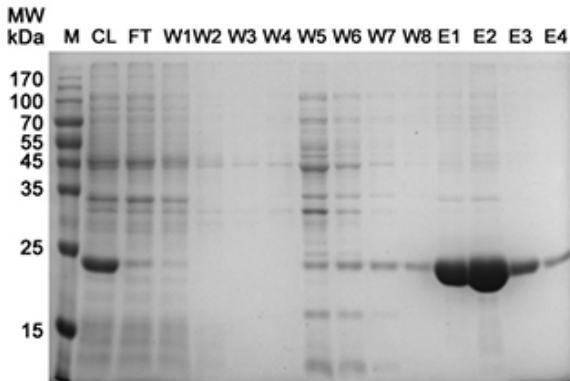


图 3. 8M 尿素变性条件下，耐变性剂型 His 标签蛋白纯化试剂/试剂盒纯化 His 标签重组蛋白效果图。M：marker (碧云天 P0076)；CL：细菌裂解液；FT：上样穿液；W1-W3：变性裂解液洗涤 1-3；W4-W8：变性洗涤液洗涤；E1-E4：洗脱液 1-4。

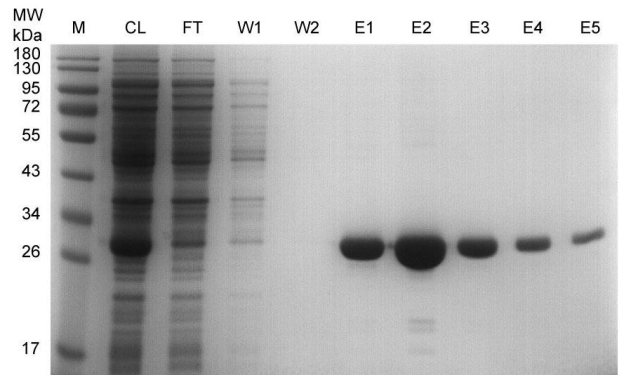


图 4. GST 标签蛋白纯化效果图。M：marker；CL：细菌裂解液(cell lysate)；FT：上样流穿液(flow through)；W1-W2：洗涤液 1-2 (wash 1-2)；E1-E5：洗脱液 1-5 (elution 1-5)。

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
P2210	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐还原螯合型)	10ml
P2218	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐还原螯合型)	100ml
P2220	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐还原螯合型)	1000ml
P2233	BeyoGold™ His-tag Purification Resin (耐变性剂型)	10ml/100ml/1000ml
P2226	His 标签蛋白纯化试剂盒(耐还原螯合型)	10ml
P2229S	His 标签蛋白纯化试剂盒(耐变性剂型)	10ml
P2250/1/3/5	BeyoGold™ GST-tag Purification Resin	1ml/10ml/100ml/1000ml
P2262	GST 标签蛋白纯化试剂盒	10ml

订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com

QQ: 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: www.beyotime.com

上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号